


N-LINE-T MODUL

Denna portabla men kraftfulla modul behandlar lokaliserade lesioner i en klinisk miljö eller som för användning i hemmet.

Produktöversikt


N-LINE T-MODULEN riktar sig mot måttliga eller till och med svåra lesioner med höga doser av UV samtidigt som exponeringen för den opåverkade huden minskar. Du kan alltid placera enheten, beroende på applikation: På golvet eller ett bord. Modulen använder dosimetri i realtid för att förbättra säkerheten och noggrannheten.

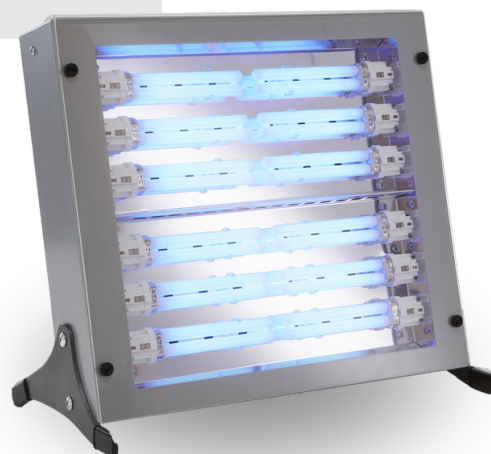

Dess portabilitet gör den lätt att integrera i alla kliniska miljöer. Det kan också hjälpa patienter att självbehandla hemma.

Egenskaper

- 1.** Patienterna följer sin läkares behandlingsplan och anger dosen, möjliggör enkel hemmabehandling.

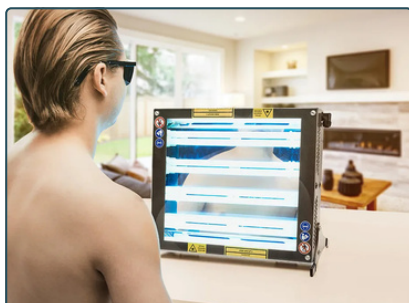

- 2.** Placera enheten snabbt i upprätt eller platt läge, på golvet eller ett bord - beroende på dina behov.



- 3.** Använd på olika kroppsdelar och förflytta enheten enkelt mellan rum tack vare dess kompakta design.



Lokal behandling | Portabel | Hemanvändning | Enkel att använda | Vatten & smutsavvisande yta | Active Air Flow | Elektronisk ballast | Sparar tid



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!

www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu

Lampor	4 x 36 W
Spektrum	UVA (PUVA), UVA-1, UVB-311nm (smalband), UVB (bredband)
Kraft	
Volt	230V, 50Hz
Energiförbrukning	160VA
Dimensioner	
Höjd	12cm
Bredd	50cm
Djup	40cm
Vikt	7,5kg
Egenskaper	
Dose-Sense	Dosimetri i realtid för tillförlitliga resultat
Reflex-Pro	Reflekterande paneler maximerar lampans effektivitet och kortar behandlingstid.
Kristallklar skärm	Den kristallklara akrylskärmen skyddar lamporna från smuts och skador.
Vattenavvisande	Vattentäta akrylpaneler är designade med en droppkant för att rikta vätskor bort från höljet.
Elektronisk Ballast	Elektroniska förkopplingsdon ger högre lampeffekt, lägre strömförbrukning och längre lamplivslängd.
Gränssnitt	N-LINE T-MODULEN är utrustad med en enkel styrenhet av industriell kvalitet. Lämpliga dosgränser är förinställda för att förhindra driftfel.



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!
www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu