

N-LINE

Vårt mest kraftfulla och kapabla fototerapisystem någonsin.

Produktöversikt

N-LINE-serien är den ultimata lösningen för professionell UV-fototerapi. Med två exceptionella UV-kabinmodeller, var och en designad för att möta dina specifika krav.

Båda modellerna har en gemensam grund och stoltserar med vår unika kärndesign tillsammans med alla väsentliga säkerhetsfunktioner.



Egenskaper


- 1.** N-LINE pro har en modern pekskärm som antingen kan guida dig eller skapa egna profiler.



- 2.** Temperaturstyrningssystemet maximerar livslängden och prestanda genom att kyla och hålla optimal temperatur.



- 3.** Lås för snabb avstängning, nödhandtag för att avbryta behandlingen snabbt samt ett nödstopp.

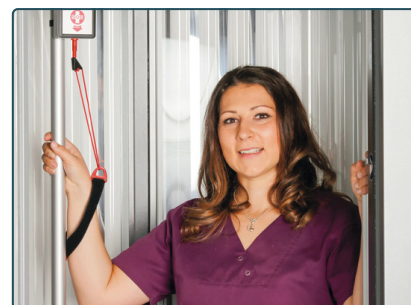

Ergonomisk | ARC-Koncept | 2M EcoFlex | Dose sense | För tung användning | Skydd av lampor | Lättåtkomlig | ReflexPro | Elektronisk start | Smooth Air Technology | Låg ljudnivå | Dust Reduction system (DRS) | Öppen kabin design



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!

www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu

Dose sense

Avancerade sensorer övervakar kontinuerligt UV-effekten och ger dosberäkningar i realtid.

ARC-koncept

Det böjda och ovala lamparrangemanget är baserat på människokroppen och säkerställer ett jämnt avstånd till huden.

Rent flöde

Genom att kanalisera luft genom noggrant konstruerade vägar minskar vi dammpartiklar inuti maskinen.

Kristallklar skärm

Den avancerade polymeren skyddar lamporna från smuts och skador samtidigt som den släpper igenom UV-ljuset obehindrat.

Tyst kylning

Den högeffektiva fläktanordningen maximerar lampans livslängd och prestanda utan att störa behandlingen.

Reflekterande

Vi använder ultrareflekterande bakpaneler. Panelerna förbättrar behandlingsmiljön genom att visuellt utöka utrymmet samtidigt som lampornas effektivitet maximeras.

2 skåp - 3 olika modeller



N-LINE

- 28x UV-lampor (3200VA)
- Industriell kontrollpanel
- Inga nätverksmöjligheter



N-LINE PRO

- 40x UV-lampor (4900VA)
- Pekskärm 8"
- PIN-auktorisering
- Nödhandtag
- Nätverksfunktioner (tillval)



N-LINE PRO MAX

- Alla N-LINE PRO-funktioner
- Extra stor pekskärm 11,8"
- Patient Voice Guide
- Nödhandtag
- Active Comfort Flow



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!

www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu

	N-LINE	N-LINE PRO	N-LINE PRO MAX
Lampor	28 x 180 cm 100 W	40 x 180 cm 100 W	40 x 180 cm 100 W
Varumärke	Philips Lampor		
Spektrum	UVA (PUVA), UVA-1, UVB-311nm (Narrowband), UVB (Broadband)		
Mixat Spektrum	Det är möjligt att installera två olika lamptyper och välja mellan det bästa behandlingsspektrumet. Följande kombinationer är möjliga: VA-1 och UVA (PUVA), UVB-311nm (smalband) och UVB (bredband)		
Kraft			
Volt	230V	400V	400V
Frekvens	50Hz	50Hz	50Hz
Förbrukning	3200VA	4900VA	4900VA
Dimensioner			
Höjd	214cm	214cm	214cm
Bredd	121cm	121cm	121cm
Djup	114cm	114cm	114cm
Vikt	280kg	330kg	330kg
Funktion			
Kontroll	Industriell kvalitetskontroller	8" Touchscreen	11,8" Touchscreen
Språkstöd	Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska, kinesiska	Tyska, engelska, franska, italienska, spanska, arabiska, bulgariska, tjeckiska, danska, holländska, finska, grekiska, ungerska, indonesiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska. Språkstödet kan utökas.	
Nätverk	x	1G Ethernet tillval	
Fjärrkontroll	x	Skindex valfritt	
Intercom	x	Valfritt	
Säkerhet			
Nödbrytare	Nödströmbrytare på utsidan		
Dosimetri	4 x Dose Sense realtidssensorer		
Fönster	Ett UV-skyddat fönster gör det möjligt att utföra en visuell kontroll av patienten		
Handstänger	Två stänger ger patienten stabilitet och stöd samtidigt som de håller dem i rätt behandlingsposition		
Nödsamtal	x	Handtag för patientnödsamtal	



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!
www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu